

IT**PROPRIETA' E INDICAZIONI**

Soluzione salina per il risciacquo di tutte le lenti a contatto. La soluzione ha una formula a pH bilanciato e molto compatibile con l'occhio. Rimuove in modo sicuro i depositi disciolti e i residui dei detergenti per lenti a contatto usato quotidianamente. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

UTILIZZI

La soluzione salina può essere usata per il risciacquo dopo la pulizia o la disinfezione, per risciacquare il contenitore e prima di applicare la lente nell'occhio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare accuratamente le mani. Dopo aver deterso le lenti con le soluzioni detergenti, risciacquare accuratamente con soluzione salina e poi procedere alla disinfezione. Dopo la disinfezione, prima di essere applicate, le lenti possono essere risciacquate con soluzione salina in alternativa alle specifiche soluzioni di risciacquo.

PRECAUZIONI

Conservare tra i 5°C e i 30°C. Prima del primo utilizzo, verificare l'integrità del sigillo del flacone. Non utilizzare se il sigillo non è integro. Una volta aperto, utilizzare entro 60 giorni. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a qualche componente. Non usare dopo la scadenza. Non utilizzare mai acqua del rubinetto per il risciacquo delle lenti. La soluzione salina non deve essere usata come disinfettante delle lenti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. **NON INGERIRE!**

CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate. In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista. Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano i lenti.

INGREDIENTI

Acido etilen diammino tetra acetico 0.01% (stabilizzante), Sodio Clorito 0.005%, Sodio Cloruro 0.79g/100ml, Sodio Fosfato Bibasico, Sodio Fosfato Monobasico, Acqua purificata.

EN**PROPERTIES AND INDICATIONS**

Saline solution for rinsing all types of soft and rigid gas-permeable contact lenses. The solution is pH-balanced and very compatible in the eye. It safely removes loosened debris and traces of daily cleaner. Please read instructions carefully before use.

USES

Saline solution can be used as a rinse after cleaning or disinfecting, to rinse lens cases and before re-insertion on the eye.

DIRECTION FOR USE

Before handling the contact lenses, wash your hands thoroughly. Saline solution can be used to rinse contact lenses before disinfecting lenses with cleaning solutions. After disinfecting, saline solution may be used before placing lenses into the eye as an alternative to rinsing with multipurpose solutions.

PRECAUTION

Once open, use within 60 days. Make sure the dropper tip is sealed before first use. If already open, do not use. Store between 5°C and 30°C! Do not use after the expiry date. Never rinse contact lenses with tap water. Never use saline solution for lens disinfection. Do not use the product if you are allergic or sensitive to any of the ingredients. Do not use eye medication whilst wearing contact lenses, except under medical supervision. Keep out of reach of children. **DO NOT SWALLOW!**

CONTRAINDICATIONS

No contraindication reported. If you experience any irritation or any other adverse effects, remove lenses and consult your specialist.

INGREDIENTS

Ethylene diamine tetra acetic acid sodium salt 0.01% (Stabilizing), Sodium Chlorite 0.005%, Sodium Chloride 0.79g/100ml, Dibasic sodium phosphate, Monobasic sodium phosphate, Purified water.

DE**EIGENSCHAFTEN UND HINWEISE**

Kochsalzlösung zum Abspülen aller weichen und formstabilen Kontaktlinsen. Die Lösung ist pH-neutral und sehr verträglich im Auge. Sie entfernt sicher gelöste Ablagerungen und Rückstände täglich verwendeter Kontaktlinsen-reiniger. Lesen Sie die Anweisung vor Gebrauch sorgfältig durch.

VERWENDUNGSZWECK

Zum Abspülen nach der Reinigung oder Desinfektion, zum Abspülen von Linsenbehältern und vor dem erneuten Aufsetzen auf das Auge.

ANWENDUNG

Vor jeder Handhabung mit Kontaktlinsen gründlich die Hände waschen. Die Kochsalzlösung kann zum Abspülen von Kontaktlinsen verwendet werden, bevor die Linsen mit Reinigungslösungen desinfiziert werden. Nach der Desinfektion kann Kochsalzlösung vor dem Aufsetzen der Linsen als Alternative zum Abspülen mit einer Multifunktionslösung verwendet werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

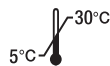
Nach dem Öffnen innerhalb von 60 Tagen verbrauchen. Vor der ersten Anwendung Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn das Siegel beschädigt ist. Zwischen 5° C und 30° C aufbewahren! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Zum Abspülen der Kontaktlinsen niemals Leitungswasser verwenden. Kochsalzlösung nicht zur Linsendesinfektion verwenden. Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit oder Allergien gegen einen Inhaltsstoff. Vor Anwendung von Medikamenten, sprechen Sie mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten. Von Kindern fernhalten! **NICHT EINNEHMEN!**

GEGENANZEIGEN

Es existieren keine nachgewiesenen Gegenanzeigen. Wenn Sie Reizungen oder andere unerwünschte Reaktionen feststellen, dann setzen Sie die Linsen ab, stoppen Sie die Anwendung des Produktes und wenden sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

INHALTSSTOFFE

Acetat Ethylendiamintetraessigsäure 0,01% (Stabilisator), Natriumchlorit 0,005% (Oxidationsmittel), Natriumchlorid (NaCl) 0,79 g/100 ml, Zweibasiches Natriumphosphat, Einbasiches Natriumphosphat, Gereinigtes Wasser.

**STERILE A**

SOLEKO S.P.A. - Via Ravano snc
03037 - Pontecorvo (FR) - ITALIA


Please Recycle!

COD226705 rev01 2022/10

FR**PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS**

La solution saline pour le rinçage de toutes les lentilles de contact. La solution a une formule au pH équilibré et est très compatible dans l'œil. Le produit élimine en toute sécurité les dépôts dissous et les résidus du nettoyant pour lentilles de contact utilisé quotidiennement. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

USAGES

La solution saline peut être utilisée pour le rinçage après le nettoyage ou la désinfection, pour le rinçage de l'étui et avant de poser la lentille sur l'œil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Se laver les mains avec soin. Après avoir nettoyé les lentilles avec des solutions détergentes, rincer abondamment avec une solution, puis procéder à la désinfection. Après la désinfection, avant l'application, les lentilles peuvent être rincées avec la solution comme alternative aux solutions de rinçage spécifiques.

PRÉCAUTIONS

Conserver entre 5° et 30° C. Avant toute utilisation, vérifier que le sceau de garantie est toujours présent sur l'embout du compte-gouttes. Ne pas utiliser le produit s'il a déjà été ouvert. Une fois le flacon ouvert, utiliser le produit dans les 60 jours. N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique ou sensible à l'un de ces ingrédients. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption. Ne pas utiliser l'eau du robinet pour rincer les lentilles de contact. Ne pas utiliser la solution saline pour désinfecter les lentilles. Tenir hors de portée des enfants. **NE PAS AVALER!**

CONTREINDICATIONS

Il n'y a pas de contre-indications établies. En cas d'inconfort ou d'irritation persistante, arrêtez l'utilisation et consultez votre professionnel des soins oculaires. Consultez votre ophtalmologiste avant d'utiliser tout médicament ophtalmique durant le port de vos lentilles.

COMPOSANTS

Acide éthylène diamine tétra-acétique 0,01% (stabilisateur), chlorure de sodium 0,005%, Chlorure de sodium 0,79g/100ml, Phosphate de sodium bibasique, Phosphate de sodium monobasique, Eau purifiée.

NL**EIGENSCHAPPEN EN INDICATIES**

Zoutoplossing voor het spoelen van alle soorten contactlenzen. De oplossing is pH-gebalanceerd en zeer compatibel in het oog. Het verwijdert veilig losgekomen vuil en sporen van de dagelijkse reiniger. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik.

GEBRUIK

Zoutoplossing kan worden gebruikt als spoeling na het reinigen of ontsmetten, om lenshouders te spoelen en vóór het.

GEBRUIKSAANWIJZING

Was uw handen grondig voordat u de contactlenzen aanraakt. Zoutoplossing kan gebruikt worden om contactlenzen af te spoelen alvorens ze te desinfecteren met een reinigingsvloeistof. Na het desinfecteren kan zoutoplossing worden gebruikt voor het inbrengen van de lenzen in het oog, als alternatief voor het spoelen met multi-purpose vloeistoffen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Na het openen, de oplossing in het flesje binnen 60 dagen volledig gebruiken. De oplossing niet gebruiken als het zegel van het flesje werd veranderd. Tussen 5°C and 30°C bewaren! Gebruik het product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Voor het uitspoelen nooit leidingwater gebruiken. Gebruik nooit een zoutoplossing voor het desinfecteren van de lens. Gebruik het product niet bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. Voordat u een medicijn inneemt, eerst uw contactlensspecialist of oogarts consulteren. Buiten het bereik van kinderen bewaren. **SLIK DE VLOEISTOF NIET IN!**

CONTRAINDICATIES

Geen contra-indicatie gemeld. Als u irritatie of andere bijwerkingen ondervindt, neem de lenzen uit en raadpleeg uw specialist.

BESTANDDELEN

Ethyleendiaminetetraazijnzuur natriumzout 0,01% (stabiliserend), natriumchloriet 0,005%, natriumchloride 0,79g/100ml, dibasisch natriumfosfaat, monobasisch natriumfosfaat, gezuiverd water.

ES**PROPIEDADES E INDICACIONES**

La solución salina para enjuagar todas las lentes de contacto. La solución tiene una fórmula de pH equilibrado que es muy compatible con el ojo. Elimina de forma segura los depósitos disueltos y los residuos del limpiador de lentes de contacto utilizado a diario. Lea atentamente las instrucciones antes de su uso.

USOS

La solución salina puede utilizarse para el enjuague después de la limpieza o desinfección, para el enjuague del recipiente y antes de colocar la lente en el ojo.

INSTRUCCIONES DE USO

Lávese bien las manos antes de manipular las lentes de contacto. La solución salina puede utilizarse para enjuagar las lentes de contacto antes de desinfectarlas con soluciones limpiadoras. Después de la desinfección, se puede utilizar suero fisiológico como alternativa al enjuague con una solución multiuso antes de ponerse las lentes.

PRECAUCIONES

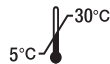
Una vez abierto, utilizarlo antes de 60 días. No utilizar la solución, si el sello de la botella ha sido modificado. Conserver entre 5°C y 30°C. No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia a algún componente. Antes de tomar un medicamento, consultar con el oculista encargado de la adaptación de las lentes de contacto propias o con un oftalmólogo. No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento. No utilizar agua del grifo para enjuagar las lentes de contacto. La solución salina no debe utilizarse como desinfectante de lentes. Conserver fuera del alcance de los niños. **¡NO ENTRAR!**

CONTRAINDICACIONES

No hay contraindicaciones establecidas. En caso de malestar o irritación ocular persistente, suspenda su uso y consulte con su profesional en lentes de contacto.

INGREDIENTES

Ácido etilendiaminotetraacético 0,01% (estabilizador), clorito de sodio 0,005%, cloruro de sodio 0,79g/100ml, fosfato de sodio bibásico, fosfato de sodio monobásico, agua purificada.

**STERILE A**

SOLEKO S.P.A. - Via Ravano snc
03037 - Pontecorvo (FR) - ITALIA

**Please Recycle!**