



concare[®]

Pflegemittel
ab 04/2026



Kochsalzlösung
zum Spülen von allen Kontaktlinsen

Solution saline
adaptée au nettoyage de toutes les lentilles de contact

Soluzione salina
ideale per il risciacquo di tutti i tipi di lenti a contatto

Zoutoplossing
geschikt voor spoelen van alle contactlenzen

Solución salina
apta para enjuagar todo contacto

Solução salina
para enxaguar todas as lentes de contacto

Saline solution
suitable for rinsing all contact lenses

Roztwór soli fizjologicznej
do płukania wszystkich typów soczewek kontaktowych

HECHT.GROUP



Reinigungsmittel
für alle Kontaktlinsentypen

Solution de nettoyage
pour tous types lentilles de contact

Detergente
per tutti i tipi di lenti a contatto

Reiniger
voor alle typen contactlenzen

Limpiador
para todo tipo de lentes de contacto

Líquido de limpeza
para todos os tipos de lentes de contacto

Cleaner
for all types of contact lenses

Oczyszczacz
do wszystkich rodzajów soczewek kontaktowych

HECHT.GROUP



Komplettlösung
Reinigung, Desinfektion
und Aufbewahrung

Solution tout
Nettoyage, désinfection
conservation.

Al-in-One sol
Pulizia, disinfezione
conservazione.

concare
intensive clean RGP

HECHT.GROUP

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

- — Pflegemittleigenschaften 6

Peroxidsystem

- — **concare**[®] sept intense minikit 8
- — **concare**[®] sept intense multipack 8
- — **concare**[®] sept minikit 10
- — **concare**[®] sept multipack 10

Kombilösungen

- — **concare**[®] all-in-one RGP minikit 12
- — **concare**[®] all-in-one RGP multipack 12
- — **concare**[®] soft minikit 14
- — **concare**[®] soft multipack 14

Abspüllösungen

- — **concare**[®] saline 16

Reinigung

- — **concare**[®] intensive clean 18
- — **concare**[®] lipoclean 20

Augenpflege

- — **concare**[®] hy-lub plus 22

Weitere Produkte

- — **Regard**[®] 24



The logo for 'concare' is written vertically in a large, bold, black sans-serif font. To the right of the text, there are three overlapping circles: a yellow one at the top, a pink one in the middle, and a green one at the bottom. The circles are partially cut off by the left edge of the page.

concare[®]

Beste Pflege für anspruchsvolle Augen. Das ist **concare[®]**

Die richtige Pflege von Kontaktlinsen – ob weich oder formstabil – ist entscheidend für Hygiene, Komfort und eine dauerhaft klare Sicht. Hochwertige Pflegemittel sind dabei unverzichtbar, um Kontaktlinsen sicher und angenehm tragen zu können.

Mit der **concare[®]**-Familie präsentiert HECHT Contactlinsen ein sorgfältig zusammengestelltes Sortiment hochwertiger Produkte, das alle wichtigen Anforderungen der Kontaktlinsenpflege abdeckt. Die vielseitige Produktlinie bietet optimalen Schutz, zuverlässige Reinigung und höchsten Tragekomfort – abgestimmt auf die Bedürfnisse von Trägern weicher und formstabiler Kontaktlinsen.

Bieten Sie Ihren Kunden mit **concare[®]** ein umfassendes, professionelles Pflegeangebot, das Sicherheit schafft und den Alltag mit Kontaktlinsen spürbar angenehmer macht.

Lernen Sie unsere **concare[®]**-Familie kennen und bieten Sie damit Ihren Kunden eine hochwertige Produktauswahl und die Gewissheit, bei Ihnen rundum gut versorgt zu sein.

Ihr HECHT Contactlinsen Team

Die Highlights der **concare®** Produkte

concare® sept intense

Die kraftvolle Peroxidpflege mit Neutralisationstabletten für weiche, formstabile und besonders anspruchsvolle Kontaktlinsen wie Ortho-K. Frei von Konservierungsstoffen, inklusive Proteinentfernung – ideal für sensible Augen.

concare® sept

Ein sicheres, einstufiges Peroxidsystem mit Platinkatalysator für eine einfache Anwendung. Ebenfalls konservierungsmittelfrei und hochverträglich.

concare® all-in-one RGP

Die Premium-Rundum-Pflege für formstabile Kontaktlinsen: gründliche Reinigung, starke antibakterielle Wirkung und zuverlässige Desinfektion in einem Schritt. Erhöhte Viskosität durch MHPC für optimierten Tragekomfort.

concare® soft

Die komfortorientierte All-in-One-Kombilösung für weiche Kontaktlinsen. Entfernt Fette, Eiweiße und Muzine effektiv, besitzt eine antibakterielle Wirkung und ist dank Hyaluronat besonders für empfindliche Augen geeignet.

concare® saline

Die vielseitige Kochsalzlösung ist frei von klassischen Konservierungsmitteln und für alle Kontaktlinsentypen geeignet. Ideal zum Abspülen aller Arten von Kontaktlinsen und Kontaktlinsenbehältern.

concare® intensive clean RGP

Ein abrasiver Reiniger für eine intensive Reinigung formstabiler Kontaktlinsen – enthält Silizium- (Kieselsäure) und Titandioxid, nicht geeignet für plasmabeschichtete Kontaktlinsen.

concare® lipoclean

Zur täglichen Reinigung für alle Kontaktlinsentypen. Entfernt zuverlässig Ablagerungen wie Fette und Lipide und sorgt für klare Sicht.

concare® hy-lub plus

Konservierungsmittelfreie Hyaluronat-Augentropfen (0,2%) für frische, gut befeuchtete Augen und gesteigerten Komfort. Auch für Nicht-Kontaktlinsenträger geeignet.

Symbol-Legende



Peroxidsystem mit Tabletten



Peroxidsystem mit Platinkatalysator



Flüssigkeit darf nicht ins Auge



Enthält benetzende Substanzen



Vollständig neutralisiert nach 1 Stunde



Vollständig neutralisiert nach 2 Stunden



Vollständig neutralisiert nach 6 Stunden



Reinigungszeit beträgt 15-30 Sekunden



Kontaktlinsen müssen über Nacht in der Lösung bleiben



Maximale Nutzungsdauer nach dem Öffnen 2 Monate



Maximale Nutzungsdauer nach dem Öffnen 3 Monate



Maximale Nutzungsdauer nach dem Öffnen 4 Monate



Kombilösung



Reinigungslösung



Augenpflege/
Nachbenetzung



Kochsalzlösung


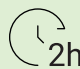





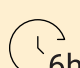



















Mitnahme im Handgepäck erlaubt

Pflegemittel- eigenschaften

		Produkttyp
	concare[®] sept intense	
	concare[®] sept	
	concare[®] soft	Kombi
	concare[®] saline	
	concare[®] all-in-one RGP	Kombi
	concare[®] intensive clean RGP	Reiniger
	concare[®] lipoclean	Reiniger
	concare[®] hy-lub plus	Pfleger
	Regard[®]	Kombi

* Bei SIH-74 und SIH-74-UV vom Materialhersteller nicht empfohlen.

für formstabile Kontaktlinsen	für weiche Kontaktlinsen	konservierungsmittelfrei (auf dem Auge)	Kontakt mit dem Auge	Zeit für vollständige Desinfektion, Reinigung, Neutralisation	maximale Aufbewahrungszeit in der Lösung	maximale Nutzungsdauer nach dem Öffnen der Flasche
✓	✓	✓			2 Tage	
✓	✓	✓			7 Tage	
—	✓	—			7 Tage	
✓	✓	✓		—	—	
✓	—	—			7 Tage	
✓	—	—			—	
✓	✓*	—			—	
✓	✓	✓		—	—	
—	✓	✓			30 Tage	

concare® sept intense


minikit

60 ml Peroxidlösung
8 x Doppelschichttabletten (für 8 Anwendungen)
1 x Kontaktlinsenbehälter



multipack

2 x 350 ml Peroxidlösung
90 x Doppelschichttabletten (für 90 Anwendungen)
2 x Kontaktlinsenbehälter

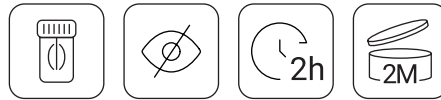

Produktinformation

concare® sept intense

Geeignet für alle Kontaktlinsentypen, besonders für Ortho-K, formstabile Speziallinsen oder Weichlinsen mit starker Proteinproblematik.

Zweck

Wasserstoffperoxydsystem mit Neutralisationstabletten zur Desinfektion und Reinigung für alle formstabilen und weichen Kontaktlinsen. Bei medizinischen und kosmetischen Farblinsen kann sich in einzelnen Fällen die Farbe verändern. Die Pflegeempfehlung des jeweiligen Kontaktlinsenherstellers ist zu beachten.

Vorteile

- Frei von Konservierungsmitteln
- Wasserstoffperoxydsystem mit Neutralisationstabletten inklusive Proteinentfernung
- Schnelles Verfahren – Reinigungs-, Desinfektions- und Neutralisationsprozess innerhalb von 2 Stunden
- Farbindikator für höchste Sicherheit
- Für alle formstabilen und weichen Kontaktlinsen, besonders für Ortho-K und formstabile Speziallinsen
- Eine wöchentliche Reinigung mit Enzymtabletten nicht mehr notwendig

Zusammensetzung

Lösung: Wasserstoffperoxyd 3%

Tablette: Natriumchlorid, Borsäure, Borax anhydrous, Polyvinylpyrrolidon, Subtilisin, Katalase, Riboflavin, Chlorophyllin.

Empfehlung

Bei besonders sensiblen Augen

Vor dem Aufsetzen die Kontaktlinsen mit **concare®** saline abspülen und mit Befeuchtungstropfen **concare®** hy-lub plus benetzen.

Bei starker Lipidproblematik


Verwenden Sie zusätzlich den alkoholhaltigen Oberflächenreiniger **concare®** lipoclean.

concare® sept

minikit

100 ml Peroxidlösung


1x Kontaktlinsenbehälter mit Katalysator

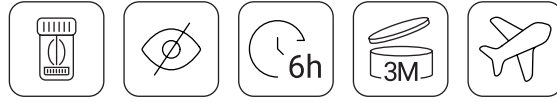

multipack

2 x 360 ml Peroxidlösung

2 x Kontaktlinsenbehälter mit Katalysator

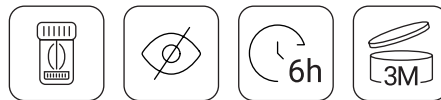

Produktinformation

concare® sept

Sichere Handhabung dank Einstufen-Peroxidsystem
(Neutralisation durch Platinkatalysator statt Tablette)

Zweck

Einstufen-Peroxidsystem zur Desinfektion und Reinigung für alle formstabilen und weichen Kontaktlinsen. Ausgenommen sind Farblinsen und/oder kosmetische Kontaktlinsen.

Vorteile

- Frei von Konservierungsstoffen
- Einfaches Verfahren durch den Platinkatalysator. Nach dem Einfüllen des Wasserstoffperoxids erfolgt der Reinigungs-, Desinfektions- und Neutralisationsvorgang.
- Eine ausgezeichnete antimikrobielle Wirksamkeit
- Neutralisation innerhalb von 6 Stunden oder über Nacht
- Für alle formstabilen und weichen Kontaktlinsen, außer Farblinsen

Zusammensetzung

Wasserstoffperoxyd (3%), Natriumdihydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Borsäure, Natriumchlorid, Dinatrium-EDTA, Phosphorige Säure, Gereinigtes Wasser.

Empfehlung

Bei besonders sensiblen Augen

Vor dem Aufsetzen die Kontaktlinsen mit **concare®** saline abspülen und mit Befeuchtungstropfen **concare®** hy-lub plus benetzen.

Bei starker Proteinproblematik

Verwenden Sie **concare®** sept intense.


Bei starker Lipidproblematik

Verwenden Sie zusätzlich den alkoholhaltigen Oberflächenreiniger **concare®** lipoclean.

concare® all-in-one RGP


minikit

100 ml Aufbewahrungslösung
1x Kontaktlinsenbehälter

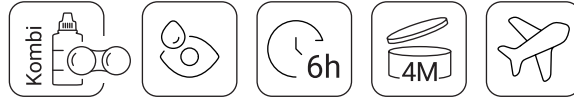

multipack

2x 200 ml Aufbewahrungslösung
2x Kontaktlinsenbehälter

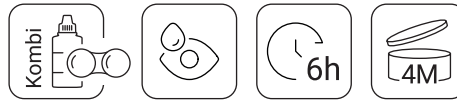

Produktinformation

concare® all-in-one RGP

Die **concare®** all-in-one-Premium-Kombilösung für formstabile Kontaktlinsen mit hervorragender antibakterieller Wirkung und gründlich reinigenden Eigenschaften.

HPMC (Hydroxypropylmethylcellulose) sorgt für die Erhöhung der Viskosität, sodass Aufsetz- und Tragekomfort optimiert werden.

Zweck

Reinigung, Desinfektion, Aufbewahrung und Aufsetzen von formstabilen und sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen.

Vorteile

- Sicheres Tragen von Kontaktlinsen dank hervorragender antibakterieller Wirkung
- Optimaler Aufsetz- und Tragekomfort

Zusammensetzung

PHMB 0,0002%, Polysorbat 80, Natriumchlorid, EDTA, Methylhydroxypropylcellulose, Borax/Borsäure, Gereinigtes Wasser.

Empfehlung

Bei starker Lipidproblematik

Verwenden Sie zusätzlich den alkoholhaltigen Oberflächenreiniger **concare® lipoclean**.

concare® soft


minikit

100 ml Kombilösung mit Natriumhyaluronat
1 x antimikrobieller Kontaktlinsenbehälter



multipack

3 x 360 ml Kombilösung mit Natriumhyaluronat
3 x antimikrobieller Kontaktlinsenbehälter

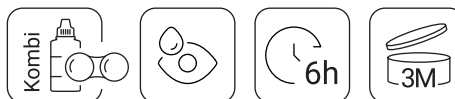

Produktinformation

concare® soft

Diese Premium All-in-One Kombilösung für weiche Kontaktlinsen verbindet Sicherheit mit einem sensationell hohen Tragekomfort. Die Kombilösung mit aktivem Fett-, Eiweiß- und Muzinentferner hat eine hervorragende doppelte antibakterielle Wirkung und ist durch Zusatz von Hyaluronat sehr gut für empfindliche Augen geeignet. Water-Lock sorgt für eine Feuchtigkeitsspeicherung über den ganzen Tag. Dadurch trägt die Kombilösung zu extra hohem Tragekomfort der Kontaktlinse bei, was Reizung und Trockenheit des Auges verringert.

Zweck

Reinigung, Desinfektion, Entfernung von Proteinablagerungen, Aufbewahrung, Abspülen und Befeuchtung von allen weichen Kontaktlinsen.

Vorteile

- Empfohlen für empfindliche Augen
- Doppelte antibakterielle Wirkung
- Erhöht den Tragekomfort der Kontaktlinse, was Reizung und Trockenheit des Auges verringert

Zusammensetzung

Polyquaternium 0,00065%, PHMB 0,00002%, Hyaluronat, Natriumchlorid, EDTA, Poloxamer, Borax/Borsäure, Gereinigtes Wasser.


Empfehlung

Bei starker Lipidproblematik

Verwenden Sie zusätzlich den alkoholhaltigen Oberflächenreiniger **concare® lipoclean**.

concare[®] saline

100 ml

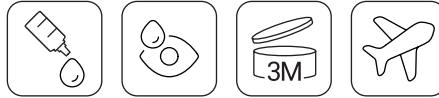

360 ml



Produktinformation

concare® saline

Die **concare®** saline ist eine isotonische, sterile, gepufferte Lösung ohne klassische Konservierungsmittel. Die saline hat einen ausgewogenen pH-Wert, eine ähnliche Osmolarität wie menschliche Tränen. Sie enthält einen Phosphatpuffer, der auch im natürlichen menschlichen Tränenfilm vorkommt und so für hohe Verträglichkeit sorgt.

Zweck

Zum Abspülen aller weichen und formstabilen Kontaktlinsen nach der Reinigung oder Desinfektion und vor dem Aufsetzen auf das Auge.

Weitere Verwendung: zum Abspülen von Kontaktlinsenbehältern.

Vorteile

- Frei von klassischen Konservierungsmitteln
- Die Kochsalzlösung hat einen ausgewogenen pH-Wert
- Für alle Kontaktlinsentypen

Zusammensetzung

Natriumchlorit 0,005%, Natriumchlorid, Dibasisches Natriumphosphat, Monobasisches Natriumphosphat, Dinatrium-EDTA, Gereinigtes Wasser.

Empfehlung


Bei besonders sensiblen Augen

Vor dem Aufsetzen die Kontaktlinsen mit **concare®** saline abspülen und mit Befeuchtungstropfen **concare®** hy-lub plus benetzen.

concare® intensive clean RGP

Reiniger

30 ml Reinigungslösung

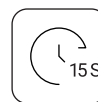

Produktinformation

concare® intensive clean RGP

Abrasiver Reiniger mit Silizium- und Titandioxid für die intensive Reinigung von formstabilen Kontaktlinsen. Nicht geeignet für plasma-beschichtete Kontaktlinsen.

Zweck

Intensivreiniger für formstabile Kontaktlinsen.

Vorteile

- Gründliche Reinigung von formstabilen Kontaktlinsen
- Intensive Oberflächenreinigung durch Silizium- (Kieselsäure) und Titandioxid

Zusammensetzung

PHMB 0,0003%, EDTA, Dimethicon-Emulsion, Titandioxid, Silica Colloidalis Anhydrica, Natriumchlorid, Propylenglycol, Natriumlaurylethersulfat, Borax/Borsäure.

Empfehlung

Bei starker Lipidproblematik

Verwenden Sie zusätzlich den alkoholhaltigen Oberflächenreiniger **concare® lipoclean**.

concare[®] lipoclean

Reiniger

40 ml alkoholhaltiger Reiniger



Produktinformation

concare® lipoclean

Optimaler Reiniger mit Alkohol, für die tägliche Reinigung von formstabilen und weichen Kontaktlinsen.

Zweck

Alkohohlhaltiger Reiniger zum täglichen Gebrauch, geeignet für alle Kontaktlinsen.

Vorteile

- Für die tägliche Anwendung
- Für alle Kontaktlinsentypen
- Entfernt Fette und Lipide

Zusammensetzung

PHMB 0,002%, Methyloxiran/Ethylenoxid-Polymer, Cocoamphodipropionat, Propylenglycol, Chlorwasserstoff, Gereinigtes Wasser.

Empfehlung

Bei starker Lipidproblematik

concare® lipoclean eignet sich perfekt als regelmäßiger zusätzlicher Oberflächenreiniger.

Kontaktlinsen direkt nach dem Absetzen reinigen.

Kontaktlinsen nicht in **concare® lipoclean** aufbewahren.

concare[®] hy-lub^{plus}

Augenpflege

10 ml Befeuchtungstropfen



Oté Pharma Sol BV
Vluchtoord 38
NL-5406 XP Uden

Produktinformation

concare® hy-lub plus

Augentropfen ohne Konservierungsstoffe auf Basis von 0,2% Hyaluronat. Befeuchtung für extra Komfort und Lubrikation (Schmierung) bei leichter Augenreizung und trockenen Augen. Auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

Vorteile

- Frei von Konservierungsstoffen
- Anwendbar bei leichter Augenreizung und trockenen Augen
- Auch in Kombination mit Kontaktlinsen anwendbar
- Nach dem Öffnen drei Monate lang haltbar

Zusammensetzung

HA 0,2%, Natriumchlorid, EDTA, Phosphatpuffer, Gereinigtes Wasser.

Empfehlung

Auch ohne Kontaktlinsen


Die positive und wohltuende Wirkung ist natürlich auch ohne Kontaktlinsen gegeben. Intensive Computerarbeit, inkomplette Lidschläge und klimatisierte Räume, sind alles Faktoren, die den Tränenfilm negativ beeinflussen können.

concare® hy-lub plus - eine Wohltat für die Augen!

Regard®


60 ml Kombilösung

1 x Kontaktlinsenbehälter

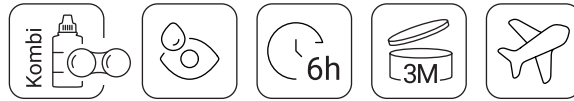

2 x 355 ml Kombilösung

2 x Kontaktlinsenbehälter

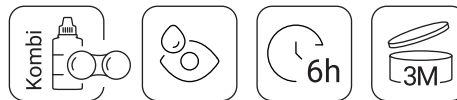

Produktinformation

Regard®

Regard® ist eine moderne, innovative Kombilösung und eignet sich zum Reinigen, Abspülen, Desinfizieren und Aufbewahren aller weicher Kontaktlinsen und sorgt gleichermaßen für Komfort und Hygiene.

Der OxyChlorite®-Komplex ist ein aktives Desinfektionsmittel und beseitigt schädigende Mikroorganismen, Enzyme und Toxine, sowie Proteinablagerungen.

Zweck

Reinigung, Desinfektion; Aufsetzen, Aufbewahrung, Abspülen und Befeuchtung von allen weichen Kontaktlinsen.

Vorteile

- Empfohlen für empfindliche Augen
- HPMC (Hydroxypropylmethylcellulose) steigert den Tragekomfort.
- Konservierungsmittelfrei auf dem Auge: Der OxyChlorite®-Komplex zerfällt bei der Anwendung in die natürlichen Bestandteile des Tränenfilms (Salz und Wasser) und setzt dabei Sauerstoff frei.
- Auch für Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen geeignet
- Einfache Anwendung

Zusammensetzung

Isotonische, gepufferte Lösung aus Wasser, Natriumchlorid, Boratpuffer, Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) 0,15%, Poloxamer, OxyChlorite®.


Empfehlung

Aufbewahrung bis zu 30 Tage

Durch den OxyChlorite®-Komplex können Kontaktlinsen bis zu 30 Tage im geschlossenen Kontaktlinsenbehälter aufbewahrt werden.

Bei starker Lipidproblematik

Verwenden Sie zusätzlich den alkoholhaltigen Oberflächenreiniger **concare®** lipoclean.

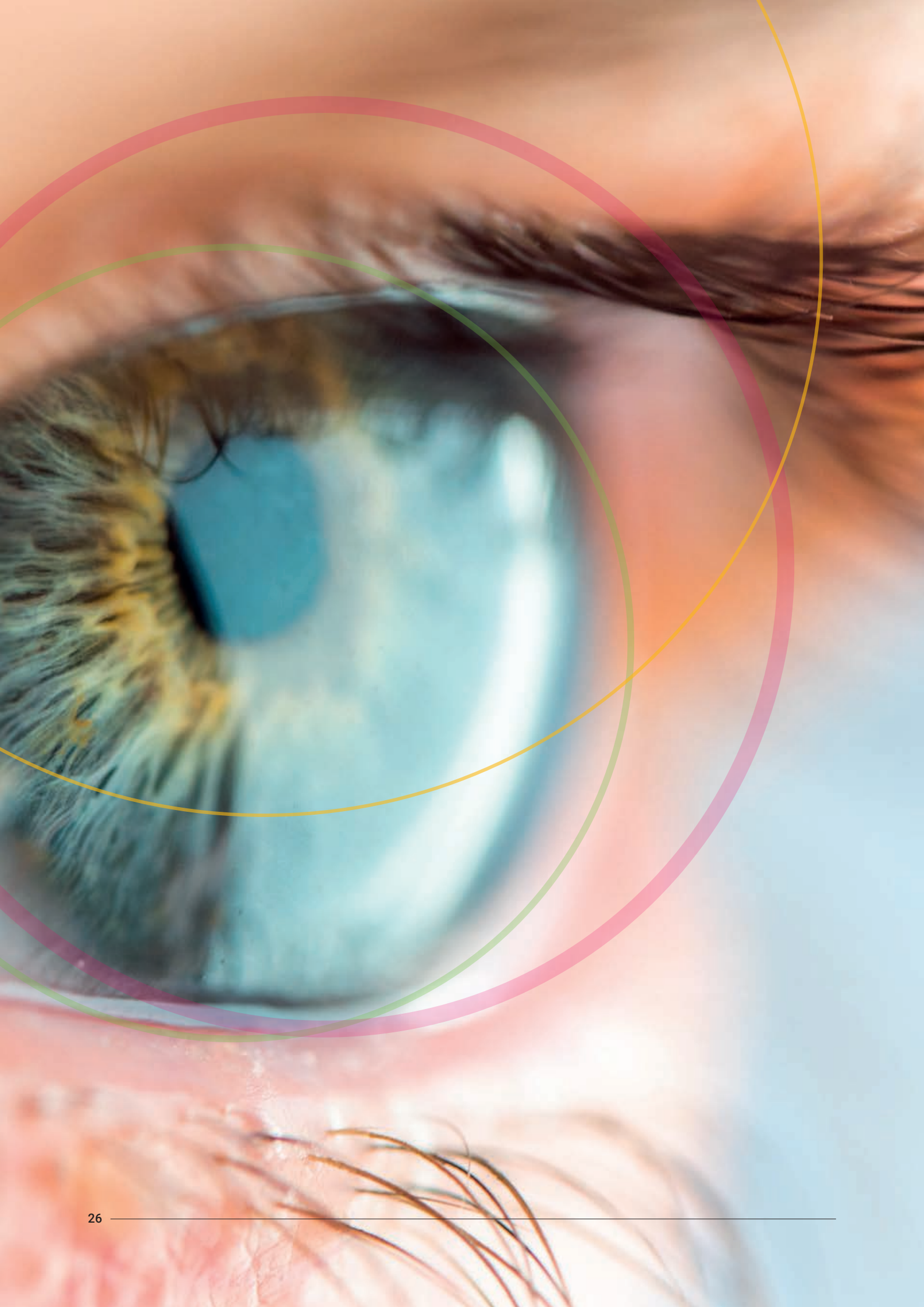

Warum **concare**[®] begeistert

Reinheit, die man spürt – kraftvolle, schonende Reinigung für weiche und formstabile Kontaktlinsen.

Komfort, der berührt – durch Inhaltsstoffe wie HPMC (Hydroxypropylmethylcellulose) – Befeuchtung und erhöhte Viskosität, Hyaluronat zur Befeuchtung der Augen, geeignet für empfindliche Augen.

Frische, die bleibt – von All-in-One Pflege bis hin zu beruhigenden Augentropfen für sofortige Entspannung.

Unser Angebot für Sie.

Profitieren Sie von unserem attraktiven Einzelpreis – ideal für den flexiblen Bedarf. Richtig sparen können Sie jedoch mit unseren praktischen Vorteilspaketen:

Mini-Paket, Medium-Paket oder **Maxi-Paket** – wählen Sie die passende Größe für Ihren individuellen Verbrauch und sichern Sie sich spürbare Preisvorteile.

Mehr Pflege. Mehr Vorrat. Mehr Ersparnis.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne zu Ihrem optimalen Paket.

Bestellannahme

Telefon +49 761 40105-11
bestell@hecht-contactlinsen.de

Anpassberatung


Telefon +49 761 40105-33
service@hecht-contactlinsen.de

Webshop

shop.hecht-contactlinsen.de



Ihre HECHT Kundennummer





HECHT Contactlinsen GmbH
Dorfstraße 2-4
79280 Au bei Freiburg
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 761 40 10 5.0
info@hecht-contactlinsen.de
www.hecht-contactlinsen.de

